

Tischträger für tiefe Bildschirme



Monitoraufnahme

CL-Bügel, VESA 75/100

Farbauswahl

Kunststoffteile RAL 5013 kobaltblau / RAL 7024 graphitgrau
Aluminiumteile RAL 9016 verkehrsweiß / RAL 9002 grauweiß

Max. Zuladung Monitoraufnahme

18 kg

Artikelnummer

Tischträger mit Bodenplatte zum Verschrauben
auf Tisch- oder Ablagefläche (siehe Abb.)
T-HK-60.CD_50

Tischträger freistehend
T-HK-62.CD_50




Alle freistehenden Tischträger müssen
in Abhängigkeit des Monitorgewichts
auf Kippstabilität getestet werden!


Tischträger für tiefe Bildschirme

Technische Daten - mit Bodenplatte

SEITENANSICHT

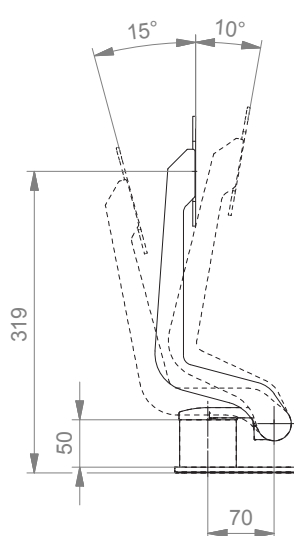

DRAUFSICHT

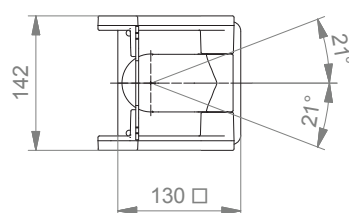

Allgemeine Hinweise

Monitoraufnahme

Die Monitoraufnahme VESA 75/100 steht in verschiedenen Ausführungen zur Verfügung:

- Standard VESA 75/100
- VESA Aufnahme drehbar (Portrait-Landscape Anwendung)
- VESA Aufnahme mit Quick Release zur schnellen Demontage (siehe Katalog: VESA 75/100 Anbindungen mit Quick Release)

Komponentenerdung

Alle Tragarme mit integrierter Kabelführung sind mit einer **Komponentenerdung** versehen. Bei externer oder teil-integrierter Kabelführung, bei der keine Kabel durch die Gelenke geführt werden, kann auf die Komponentenerdung verzichtet werden.

Gewichtsbelastung

Alle **höhenverstellbaren** Tragarme haben eine maximale Gewichtsbelastung von 22 kg. Bei rückseitigen Adaptionen und bodenseitigen Anbindungen mittels der 5" Montageplatte darf das Monitorgewicht maximal 18 kg betragen. Weitere 4 kg können beispielsweise über einen Down Post unterhalb des vorderen Drehgelenks befestigt werden. Je nach Material und dessen Bruchdehnung haben alle Gewichtsangaben einen 4- bzw. 6-fachen Sicherheitsfaktor gemäß den Regularien EN 60601-1, 3rd Edition.

Sonderlösungen und Anwendungen im Kernspinbereich / MRI

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie **kundenspezifische** Lösungen suchen.

Produktkennzeichnung

Alle CIM Produkte sind mit dem CE-Kennzeichen versehen. Als **Medizinprodukt der Risikoklasse 1** entsprechen sie den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG und sind konform mit den Regularien EN 60601-1, 3rd Edition. TÜV Reports für zahlreiche Produkte, v.a. im Bereich Anästhesie, bescheinigen die mechanische und elektrische Sicherheit unserer Produkte.



Erstellen von Artikelnummern

Bitte gehen Sie bei der Konfiguration der Artikelnummern wie folgt vor:

Alle Buchstaben in grün bitte mit dem entsprechenden Artikelnummern-Code ersetzen.

1. Komponentenerdung:

S	=	Nicht geerdet
A	=	Geerdet

2. Wählen Sie die gewünschte Tragarmvariante aus:

910G / 910GS	=	Flush Mount
224G / 230G / 224GS / 230GS	=	Tragarm Pivot
33030G / 33030GS	=	Dreigelenkarm Light
H33030G / H33030GS	=	Dreigelenkarm
431G / 431GS	=	Höhenverstellbarer Tragarm
73130G / 73130GS	=	Höhenverstellbarer Dreigelenkarm
531G / 531GS	=	Höhenverstellbarer Tragarm für hohe Montageposition
83130G / 83130GS	=	Höhenverstellbarer Dreigelenkarm für hohe Montageposition

3. Spezifizieren Sie die Anbindung - wo wollen Sie Ihre Halterung befestigen (Y):

1V	=	Rundrohr \varnothing 23 - 40 mm
1	=	Rundrohr \varnothing 25 mm
1F	=	Rundrohr \varnothing 35 mm
1C	=	Rundrohr \varnothing 38 mm
2F	=	Horizontale Normschiene 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm
3	=	Vertikale Normschiene 10 x 25 mm
3DR	=	2 vertikalen Normschienen, Abstand 150 mm
3TX	=	2 vertikalen Normschienen, Abstand 225 mm
4V	=	Vertikaler Wandkanal
4U	=	Vertikaler Wandkanal für Tragarme für hohe Montageposition
	=	Anästhesiegeräte mit Seitenkanal
13	=	Mindray Deckenstative
17	=	Amico Deckenstative
9	=	Löwenstein Medical Anästhesiegeräte
10	=	Maquet FLOW i Anästhesiegeräte

Erstellen von Artikelnummern

4. Wählen Sie die Farbe der dekorativen Kunststoffteile (C):

- gr = RAL 7024 (graphitgrau)
- bl = RAL 5013 (kobaltblau)

5. Wählen Sie die Farbe der Aluminiumdruckussteile (D):

- 1 = RAL 9016 (verkehrsweiß)
- 2 = RAL 9002 (grauweiß)

6. Spezifizieren Sie die Federstärke gem. des Monitorgewichts - nur bei höhenverstellbaren Armen (X):

- 60 = 2 - 5 kg
- 95 = 4 - 9 kg
- 130 = 7,5 - 13 kg
- 175 = 13 - 16 kg
- 220 = 16 - 22 kg

Beispiel

01 Erdung		02 Armtyp		03 Adaption		04 & 05 Farbe		06 Federstärke
A	-	431G	-	Y	.	CD	-	X
A	-	431G	-	4V	.	gr1	-	95